

Orientações Gerais

- Cada marca e modelo de canetas diferem entre si. Fique atento à sua!
- As canetas de insulina devem ser utilizadas apenas por um usuário.
- Não é possível misturar dois tipos de insulina na caneta. Caso seja necessário, o paciente fará duas aplicações.
- Em caso de dúvidas, pergunte um profissional de saúde.



Imagens: Shutterstock Images

Tem alguma dúvida? Anote aqui!



Organização:
André de Oliveira Baldoni
Mariana Linhares Pereira
Paula Resende Daher Chaves
Thays Santos Mendonça

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diabetes Mellitus. (Cadernos de Atenção Básica, n. 16). Brasília, 2006 BD, Becton Dickson. Disponível em: /bd.com/. Acesso em Mai, 2018.

Contato: projetodocedia@gmail.com
Apoio Financeiro:



2019



CANETA DE INSULINA: COMO USAR?



Imagens: Shutterstock Images

TÉCNICA PARA USO DA CANETA DE INSULINA: SIGA OS PASSOS!

1



Lave e seque as mãos. Separe a caneta com a insulina, a agulha e o álcool 70%.

2




Deixe homogênea a insulina, movimentando levemente a caneta, para garantir ação correta da insulina.

3




Limpe o local que será acoplada a agulha com álcool 70% e espere secar.

4

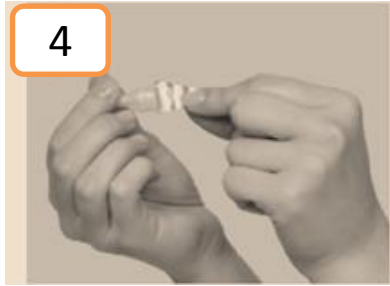

Remova o lacre da agulha e rosqueie na caneta.

5

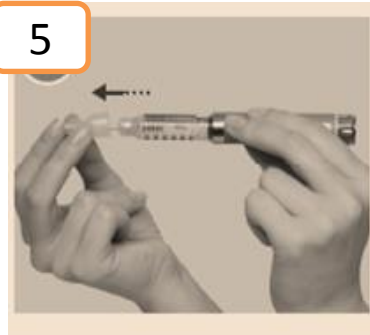

Selecione a dose prescrita, retire os protetores externo e interno.

6



Limpe o local da aplicação com álcool 70%.

7



Faça a prega subcutânea e introduza a agulha, injete o medicamento e aguarde no mínimo 10 segundos para que toda insulina registrada seja injetada.

8



Remova a agulha da caneta usando o protetor externo.

9



Descarte a agulha em recipiente com paredes rígidas, boca larga e tampa. Entregue no posto de saúde mais próximo.